



Genii™-Fixierstreifen

Geniale Extra- Sicherheit

trio
Genii™





Machen Sie Ihren Stoma-Beutel mit weichen Fixierstreifen aus Silikon noch sicherer.

Die Genii™-Fixierstreifen legen sich um die Ränder der Hautschutzplatte und bilden einen weichen, flexiblen und unsichtbaren Übergang, der sich Ihrem Körper anpasst und Ihnen Extra-Sicherheit bietet.



Sicher haftend

Geeignet für jede Art von Bewegung, Körperform oder Temperatur.



Komfortabel

Ultradünner, unsichtbarer Schutz zum sofortigen Einsatz.



Wasserfest

Ideal zum Schwimmen, Baden und auf Reisen.



Hochflexibel

Gibt Ihnen optimale Bewegungsfreiheit.



Sanft

Schmerzfrei und ohne Rückstände entfernbar.



Länger tragbar

Verlängert die Tragezeit Ihres Beutels.

Warum ist die Sil2 Breathable Silicone Technology® so hautfreundlich?

Die Sil2 Breathable Silicone Technology® ist ein einzigartiges Haftmaterial auf Silikonbasis, das sich anfühlt und atmet wie normale Haut. Sie haftet hervorragend, absorbiert Feuchtigkeit aber nicht. Daher quillt sie nicht auf, wird zu keiner klebrigen Masse und lässt sich schmerzfrei entfernen. Sie können sie also länger tragen, ohne Leckagen zu befürchten.




Anwendung der Genii™-Fixierstreifen


Wichtig: Entfernen Sie vor dem Anbringen nicht alle Trennfolien und folgen Sie der Anleitung in Schritt 1 und 2, damit sich die Fixierstreifen einfach anlegen lassen und sicher auf der Haut und der Hautschutzplatte haften.

1. Legen Sie Ihren Stoma-Beutel wie üblich an. Wichtig: Die Haut rund um Ihre Hautschutzplatte muss trocken sein, denn **der Fixierstreifen haftet nicht auf feuchter Haut.**

2. Entfernen Sie die mit 1 gekennzeichnete durchsichtige Trennfolie vom Genii™-Fixierstreifen.

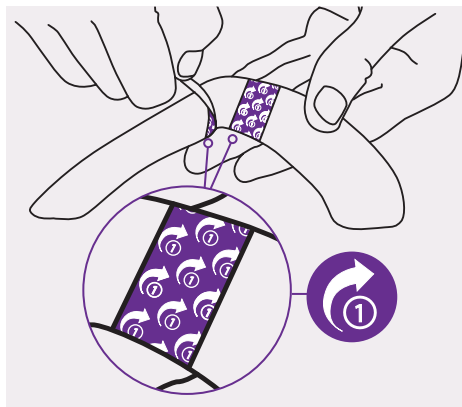

3. Legen Sie den Genii™-Fixierstreifen sicher über die Haut und um die Hautschutzplatte.

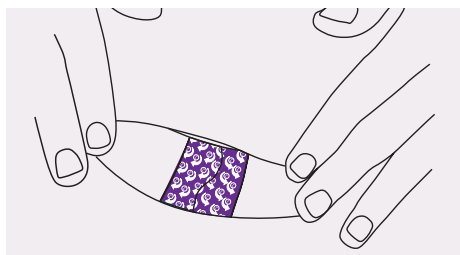

4. Entfernen Sie das mit 2 gekennzeichnete Trennpapier und streichen Sie den Fixierstreifen glatt.



Wiederholen Sie den Vorgang beim zweiten Fixierstreifen. Für optimale Wirkung lassen sich die Genii™-Fixierstreifen in unterschiedlichen Positionen anbringen.



Möchten Sie sich Genii™-Fixierstreifen verschreiben lassen?

Unsere Fixierstreifen gehören zum umfassenden Sortiment von Genii™-Hautpflögelösungen, die bei Publicare erhältlich sind. Bei Fragen hilft Ihnen Publicare gerne weiter.

Die Genii™-Fixierstreifen sind in einer Einheitsgrösse erhältlich, die sich für Stoma-Beutel jeder Form und Grösse eignet.

Genii™-Fixierstreifen

Artikelnummer	Grösse	Stoma-Grösse	Packungsgrösse
TR1060	—	Alle	20

Genii™-Hautschutzringe

Artikelnummer	Grösse	Stoma-Grösse	Packungsgrösse
TR1020	Klein	20–35mm	30
TR1028	Mittel	35–50mm	30
TR1035	Gross	50–80mm	30

Genii™-Hautschutzringe konvex

Artikelnummer	Grösse	Stoma-Grösse	Packungsgrösse
TR1020CX	Klein	20–35mm	10
TR1030CX	Gross	30–50mm	10



Haben Sie mit Leckagen zu kämpfen?

Wird das Material von Hautschutzplatte oder -ring am Stoma weich und klebrig? Ist die Haut unter Ihrer Hautschutzplatte uneben, sensibel, gerötet oder wund? Genii™-Hautschutzringe sind einfach anzuwenden. Sie lassen sich ohne Anwärmen oder Vorformen einfach gedehnt um Ihr Stoma legen und ziehen sich dann passgenau zusammen. Nehmen Sie Kontakt auf mit uns, wenn Sie weitere Informationen benötigen oder ein Gratismuster bestellen möchten.

••• publicare

 www.publicare.ch

 056 484 15 00

 info@publicare.ch

