



Genii™-Hautschutzringe

Genialer Schutz vor Leckagen

trio
Genii™





Der erste Hautschutzring aus Silikon mit perfekter Passform.

Plane und konvexe Genii™-Hautschutzringe eignen sich für alle Stoma-Typen.



Passgenauer Sitz

Umgibt das Stoma lückenlos und verhindert Leckagen.



Komfortabel und sicher

Erlaubt Bewegungsfreiheit durch hohe Flexibilität.



Schnell und einfach

anzuwenden Legt sich passgenau um das Stoma – kein Anwärmen oder Vorformen nötig.



Schutz für sensible Haut rund um das Stoma

Schützt vor Stuhl und Urin für natürliche Heilung und gesunde Haut.



Längere Tragezeit

Die einzigartige Sil2 Breathable Silicone Technology® absorbiert Körperflüssigkeiten nicht – wird nicht klebrig oder schmierig, löst sich nicht auf.

AUCH ERHÄLTlich

Konvexe Genii™-Hautschutzringe

Ideal für flache oder retrahierte Stomata und unebene Haut.

Warum ist die Sil2 Breathable Silicone Technology® so hautfreundlich?


Die Sil2 Breathable Silicone Technology® ist ein einzigartiges Haftmaterial auf Silikonbasis, das sich anfühlt und atmet wie normale Haut. Sie haftet hervorragend, absorbiert Feuchtigkeit aber nicht. Daher quillt sie nicht auf, wird zu keiner klebrigen Masse und lässt sich schmerzfrei entfernen. Sie können sie also länger tragen, ohne Leckagen zu befürchten.




Anwendung eines Genii™-Hautschuttrings

1. Säubern Sie den Bereich rund um das Stoma. Die Haut muss trocken sein, denn **der Hautschuttring haftet nicht auf feuchter Haut.**

2. Entnehmen Sie den Hautschuttring mit Daumen und Zeigefinger vorsichtig aus der Packung. Es ist ganz normal, dass der Hautschuttring an der Blisterverpackung klebt. Er ist aber robust genug, dass Sie ihn unter Dehnung abziehen können, ohne ihn zu beschädigen.

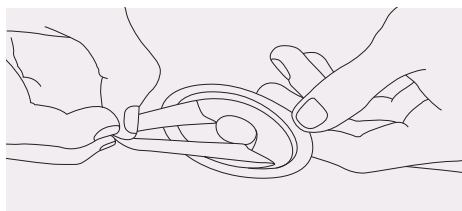


3. Nehmen Sie den Rand des Hautschuttrings in beide Hände und legen sie ihn gedehnt um das Stoma. Lassen Sie den Hautschuttring los, damit er sich komfortabel um das Stoma zusammenziehen kann.

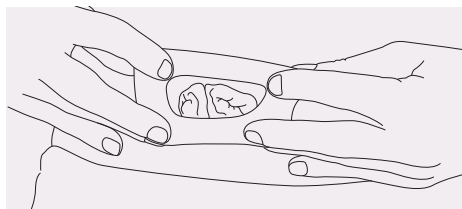

4. Der dehnbare Genii™-Hautschuttring passt sich Ihrem Stoma an, ohne dass er extra in Form gebracht werden muss. Er bildet eine sanfte, flexible Versiegelung, die sich an Ihr Stoma schmiegt.

5. Ist Ihr Stoma vom Genii™-Hautschuttring umschlossen, drücken Sie diesen leicht auf Ihrer Haut fest. Setzen Sie Ihren Stoma-Beutel wie üblich direkt auf den Hautschuttring auf und halten Sie ihn unter leichtem Druck fest, bis sich die Verbindung sicher anfühlt.

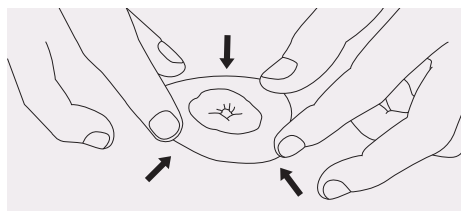

KONVEX



KONKAV

Konvexe Hautschuttringe sind vielseitig:
Sie lassen sich mit der konvexen Seite nach oben oder nach unten mit sanftem Druck sicher und passgenau um Ihr Stoma legen – je nachdem, wie Sie es brauchen.



Möchten Sie sich Genii™-Hautschutzinge verschreiben lassen?

Unsere planen und konvexen Hautschutzinge gehören zum umfassenden Sortiment von Genii™-Hautpflegelösungen, die bei Publicare erhältlich sind. Bei Fragen hilft Ihnen Publicare gerne weiter.

Auch wenn sich die Form und die Grösse Ihres Stomas ändern, gehen unsere Hautschutzinge flexibel mit. Sie sind in kleiner, mittlerer oder grosser Ausführung erhältlich – wählen Sie einfach die geeignete Grösse für Ihr Stoma.

Genii™-Hautschutzinge

Artikelnummer	Grösse	Stoma-Grösse	Packungsgrösse
TR1020	Klein	20–35mm	30
TR1028	Mittel	35–50mm	30
TR1035	Gross	50–80mm	30

Genii™-Hautschutzinge konvex

Artikelnummer	Grösse	Stoma-Grösse	Packungsgrösse
TR1020CX	Klein	20–35mm	10
TR1030CX	Gross	30–50mm	10

Genii™-Fixierstreifen

Artikelnummer	Grösse	Stoma-Grösse	Packungsgrösse
TR1060	—	Alle	20



Brauchen Sie zusätzliche Sicherheit?

Möglicherweise haben Sie eine Hernie, sind körperlich sehr aktiv oder möchten sich einfach nachts noch sicherer fühlen. Die **Genii™-Fixierstreifen** legen sich um die Ränder der Hautschutzplatte und bilden einen weichen, flexiblen und unsichtbaren Übergang, der sich Ihrem Körper anpasst und Ihnen Extra-Sicherheit bietet. Nehmen Sie Kontakt auf mit uns, wenn Sie weitere Informationen benötigen oder ein Gratismuster bestellen möchten.

••• publicare

 www.publicare.ch

 056 484 15 00

 info@publicare.ch

