

# Kit-échantillon d'étui pénien

## Mode d'emploi

Cher utilisateur,

L'étui pénien est un outil éprouvé pour les hommes présentant une incontinence urinaire. Il permet d'évacuer l'urine via une tubulure dans une poche urinaire.

Ce kit-échantillon vise à vous permettre de comprendre le fonctionnement de l'étui pénien. Les instructions qui suivent vous indiquent les étapes à suivre pour utiliser correctement l'étui pénien.

Le kit contient trois tailles différentes pour deux modèles. **Au besoin, vous pouvez commander gratuitement d'autres tailles.**

**N'hésitez pas à poser vos questions à notre personnel spécialisé:**

**056 484 15 00**

Du lundi au vendredi, de 7h à 17h

Meilleures salutations  
Publicare AG

# Vue d'ensemble Kit-échantillon d'étui pénien

Rasoir jetable  
Kai

PC 1054



Pied à coulisse  
Hollister



Bandes de fixation  
Coloplast Conveen

CP 050501



Poche de jambe 500 ml  
Hollister

H 9652



Poche de lit 1500 ml  
Coloplast Conveen

CP 050620



## Vue d'ensemble des étuis péniers

Sauer Comfort

Court

-

Standard

30mm

SA 97.30



Bard Spirit Style 2 intermed

32mm

RE 37303

-



Hollister InCare InView

25mm

H 97125

25mm

H 97225



Coloplast Conveen Optima

30mm

CP 221300

28mm

CP 220280



# Mode d'emploi du kit d'étui pénien

●●● publicare

## Préparation



**Utiliser uniquement l'étui pénien sur une peau intacte.**

Nettoyer soigneusement le pénis à l'eau claire en utilisant un savon doux. Bien sécher la peau. Ne pas utiliser d'huile, de lotion ou de poudre. Raser avec précaution les poils tout autour du pénis et au niveau du scrotum à l'aide du rasoir jetable **PC 1054**.

**INFORMATION:** veillez à ce que la peau soit sèche et non grasse afin que l'étui pénien adhère correctement.



Mesurer avec le pied à coulisse le diamètre du corps du pénis. Sélectionner l'étui adapté:

**Court:** 25 mm **H 97125**; 30 mm **CP 221300**; 32 mm **RE 37303**

**Standard:** 25 mm **H 97225**; 28 mm **CP 220280**; 30 mm **SA 97.30**

**INFORMATION:** les étuis péniers sont disponibles en deux modèles:

«court» et «standard» (tailles disponibles: diamètre de 18 à 41 mm). Ce kit-échantillon contient trois tailles pour chaque modèle. Des échantillons peuvent être commandés gratuitement pour d'autres tailles auprès de Publicare.

## Pose de l'étui pénien




Appliquer l'étui sur le gland en veillant à un espace suffisant entre le fond de l'étui et le méat urinaire (environ 1 à 2 cm). Laisser le prépuce en position naturelle et tendre la peau du pénis en tirant légèrement au niveau du prépuce.

**CONSEIL:** pincez l'extrémité de l'étui pénien. Cela garantit la formation d'un réservoir entre le gland et le dispositif pour le bon écoulement de l'urine.



Avec l'autre main, dérouler lentement l'étui le long du pénis en évitant la formation de plis dans la mesure du possible ou, le cas échéant, tirer sur la languette facilitant le déroulement. Pour une bonne adhérence, exercer une pression brève sur le pourtour de l'étui déroulé.

## Pose de la poche de jambe

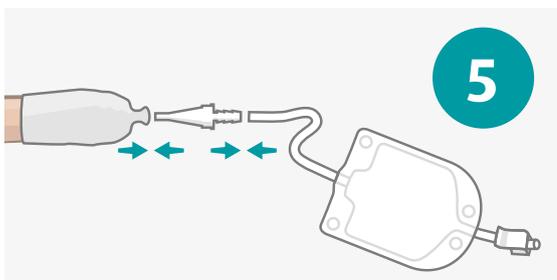


Relier l'étui au système d'évacuation (poche de jambe **H 9652**).

**CONSEIL:** il est important que le connecteur (pièce de raccordement) de la poche de jambe soit solidement relié à l'extrémité de l'étui pénien.


**INFORMATION:** la tubulure peut être raccourcie au cas par cas.



Fixer la poche à la jambe avec les bandes de fixation **CP 050501**.

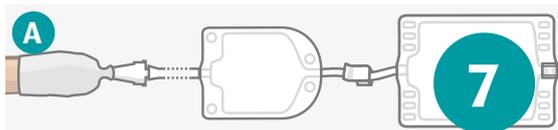


Les poches de jambe qui sont utilisées pendant la journée ont une capacité de recueil de 500 à 800 ml en fonction des modèles. Afin de ne pas avoir à vider la poche pendant la nuit, vous avez le choix entre les deux options suivantes:

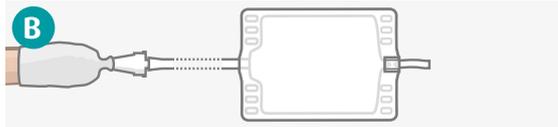

- A** Relier la poche de jambe à la poche de lit **CP 050620**.
- B** Relier le système d'évacuation directement à la poche de lit **CP 050620** (sans poche de jambe).

## Retrait de l'étui pénien

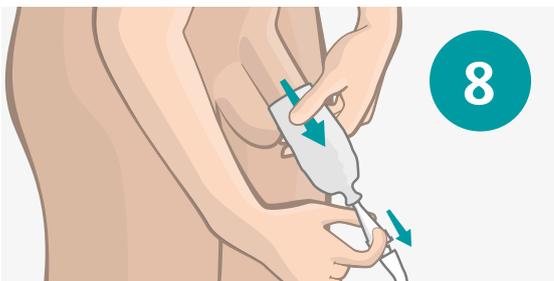

Détacher la poche urinaire de l'étui. Enlever l'étui en l'enroulant doucement sur lui-même sur toute la longueur du pénis.

Changer d'étui pénien toutes les 24 heures.

**CONSEIL:** si l'étui pénien adhère trop fortement, vous pouvez le décoller facilement avec de l'eau chaude ou un produit permettant le retrait d'adhésif.

Simple. Discret. Éprouvé.

••• publicare

**Publicare AG** | Vorderi Böde 9 | 5452 Oberrohrdorf  
Téléphone 056 484 15 00 | Fax 056 484 15 11  
info@publicare.ch | www.publicare.ch